


この度、弊社<ブレイラハイブリッド・ケアシート>をお買い上げいただき、誠に有難うございます。この「取扱説明書」には、<ブレイラハイブリッド・ケアシート>を安全にお使いいただくための注意事項や正しい使用方法等を記載していますので、ご使用前には、必ずこの「取扱説明書」をよくお読んで、安全で正しい取扱方法をご理解いただけますようよろしくお願い致します。

○正しい使用方法

- このシートは車イスの上に直接敷いてお使い下さい。
- このシートはそれぞれ前後の区別がありますので正しい方向でお使い下さい。
- このシートのカバーは表面／裏面で、それぞれ防水性／通気性と異なった機能を持っています。どちらの面で使用される場合も、必ず本体に延設されている滑り止めを下図のように使用面の反対に折り込んで下さい。シートと車イスがずれるのを防ぎ、より快適に安全にご使用いただけます。

(実際の使用図)

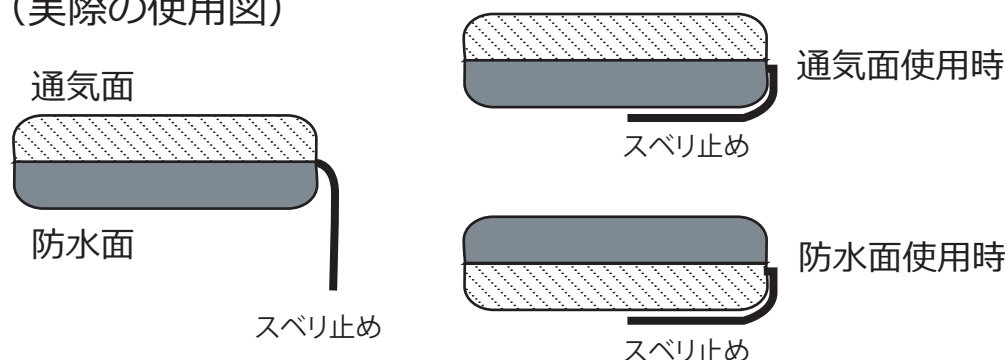

進行方向

○仕様

- 材質
 - クッション部 天然ラテックス
 - カバ ー部 防水面 ナイロン100%
 - 通気面 ポリエステル100%

■サイズスペック／コード／価格表

商品番号	サイズ	重量	TAIS	JAN
BRHS-400	400X400X50mm	0.9kg	01149-000014	4582328920063
希望小売価格14,700円（税抜き14,000円）				

⚠ 注 意

■人や物がのった状態のまま移動させないで下さい。

このシートの上に人や物がのったまま移動させると転落してけがをしたり、シートの破損の原因となります。

■必ず車イスの大きさに合ったサイズをご使用下さい。

車イスに合っていないサイズをご使用されますと、シートの持つ機能が正しく発揮されないだけでなく、車イスの部品に干渉したりして大変危険ですので、必ず適正なサイズを選んで下さい。

■直射日光や、暖房器具などの熱風が当たる場所でのご使用は避けて下さい。

変質、変色の原因となります。

■このシートの上に立ち上がるなど、局所的に過度な荷重を掛けしないで下さい。

変形、破損の原因となります。

■インナーカバーは破いて開けないで下さい

中材の保護のためにインナーカバーが掛かっていますので破いて外さないで下さい。

■このシートの上で座布団等のご使用はおやめ下さい。

すべて転倒、転落し、けがをするおそれがあります。厚みがある座布団等はシートの機能を妨げるのでおやめ下さい。

○お手入れ方法

※お手入れの際は、カバーと中材とは分けて個別にお願いいたします。

■カバーのお手入れ方法

押し洗いもしくは洗濯ネットに入れて洗濯機にて水洗いして下さい。脱水後の乾燥は陰干しして下さい。



🚫禁止事項

変色、変質、機能低下の原因になるので、柔軟剤、塩素系漂白剤は絶対に使用しないで下さい。
変形、劣化のおそれがありますので乾燥機のご使用はおやめ下さい。

■中材のお手入れ方法

消毒はアルコール等の噴霧をお勧めいたします。汚れがヒドイ場合は水による洗浄が可能です。素材自体は水を含むと大変重くなり、ちぎれやすくなるため、やさしく押し洗いをお勧めします。
機械での洗浄や脱水をされる場合はトルク等を調整し、あらかじめ破損等がないかご確認の上で使用いただきますようお願いいたします。乾燥機の使用は可能ですが、よく水分を切った後、温度は80度未満に設定し、長時間掛けるのはおやめ下さい。

🚫禁止事項

紫外線は素材劣化の原因になるので、天日干しは避け、陰干しして下さい。
変形、劣化のおそれがありますのでオゾン（消毒）は絶対におやめ下さい。

＜お問い合わせ＞

※ご不明な点は、お買い上げの販売店もしくは
右記までお問い合わせ下さい。

株式
会社 **G.REST**

〒606-8152 京都市左京区一乗寺下り松町 56-1

TEL 075-724-8412 FAX 075-724-8413

受付時間 平日 9:30 ~ 17:30

(土・日・祝日・夏季休業・年末年始を除く)